


Daten können nach oder Analyse gelöscht/ überschrieben werden

Position des letzten QRS-Komplexes = last-qr-start der Funktion findPeak

⇒ nächster Lesevorgang:

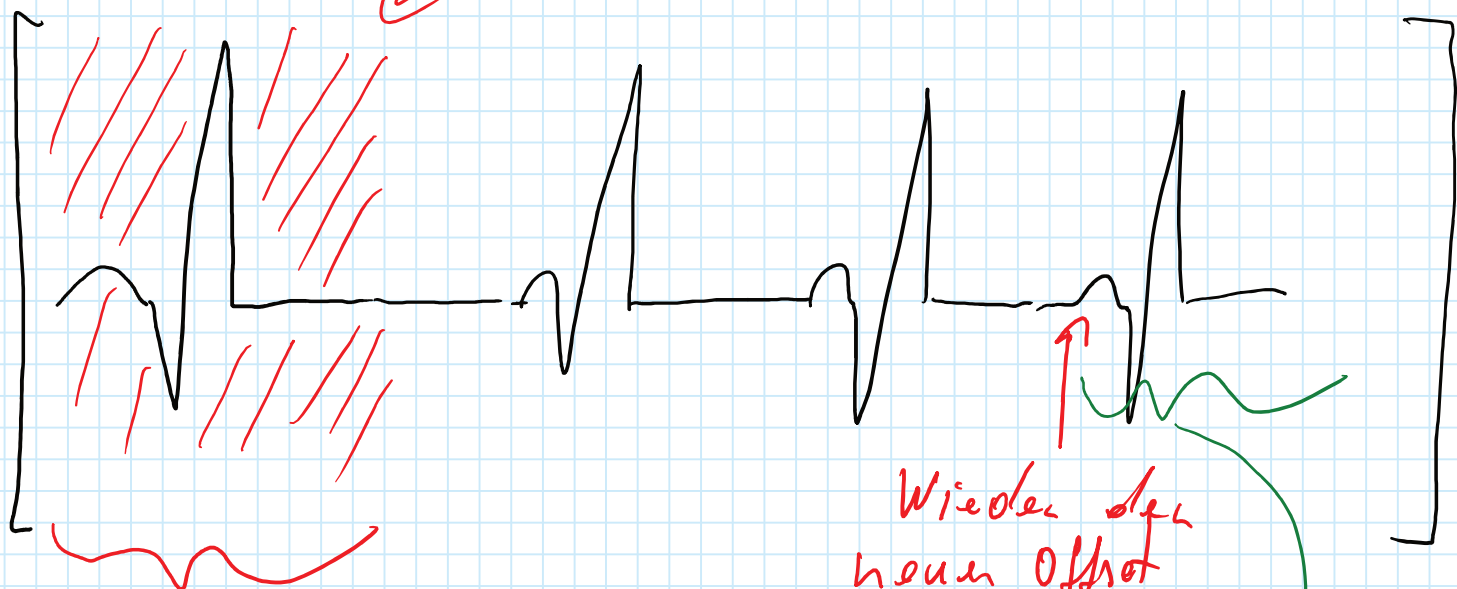

Messdaten welche noch nicht untersucht wurden vor dem Einlesen der neuen Daten auf den Beginn des Feldes kopieren

Wieder den neuen Offset merken

→ ECG DATA - TIMEOUT  
⇒ Schock !!!

Abgabe eines Schocks (Hauerschock) wenn zwischen dem letzten QRS-Komplex und dem letzten Feldelement  $> \text{ECG DATA - TIMEOUT}$  Sekunden vergangen sind

Achtung: Wenn längere Zeit keine QRS-Komplexe erkannt werden, kann es zu Fehlern kommen → Berücksichtigen